fluorecare® NT-proBNP CE

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre común: Kit de diagnóstico del péptido natriurético tipo cerebro profesional N-terminal (NT-proBNP) (ensayo inmunocromatográfico) Nombre del producto: MF-30

EMBALAJE

20 Pruebas/caja

USO PREVISTO

El fluorecare ® NT-proBNP es aplicable a la detección cuantitativa de la concentración de NT-proBNP en suero y plasma humanos.

PRINCIPIO

El NT-proBNP de fluorecare® , basado en el principio del ensayo inmunocromatográfico, se utiliza para detectar la concentración de NT-proBNP en suero o plasma humano mediante el método de sándwich de doble anticuerpo. El suero o plasma humano se agrega en el orificio de adición de la muestra, el NT-proBNP en las muestras que se van a analizar se combina con el anticuerpo NT-proBNP marcado con fluorescencia en la almohadilla de unión y se forma el complejo NT-proBNP-anticuerpo. Debido al efecto de la cromatogafia, el complejo NT-proBNP-anticuerpo se difundirá a lo largo de la membrana de nitrocelulosa. En la región de la línea de prueba (T),

El complejo NT-proBNP-anticuerpo debe combinarse con el anticuerpo recubierto en el área de la línea de detección, cuanto mayor sea la concentración de NT-proBNP, mayor será la agregación del complejo en la línea de detección, más profundo será el color de la banda fluorescente bajo la longitud de onda específica. La intensidad de la señal del anticuerpo fluorescente se correlaciona positivamente con la concentración de la sustancia que se va a medir en las muestras. El anticuerpo marcado con fluorescencia se difunde a la línea de control de calidad (C) y es capturado por el segundo anticuerpo para formar una banda fluorescente bajo la longitud de onda específica. Una vez finalizada la reacción, el instrumento puede utilizarse para interpretar los resultados. El instrumento analizará la densidad óptica de la línea de control y la línea de prueba. A continuación, el instrumento calcula la concentración del NT-proBNP de acuerdo con la curva de calibración establecida anteriormente y muestra los resultados, con pg/mL como unidad.

COMPONENTES PRINCIPALES

Componentes	Cantidad	Componentes principales
Cassette de prueba (incluye el desecante)	20 Cassettes	Cada cassette se compone principalmente de una carcasa de plástico y una tira, la parte principal de la tira reactiva está recubierta con el anticuerpo monoclonal NT-proBNP y el anticuerpo IgG de conejo. La almohadilla de unión está cubierta con el anticuerpo NT-proBNP marcado con fluorescencia y el anticuerpo IgG anti-conejo de ratón marcado con fluorescencia, y otros componentes incluyen la fibra de vidrio y Papel bibuloso.
Chip de identificación	1 Pieza	Archivos de curvas del lote correspondiente producto.
Manual de usuario	1 Copia	/

NOTA: Se necesitan instrumentos pero no se suministran: temporizador, termómetro, higrómetro, pipeta y tubos emparejados.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD

El cassette de prueba es estable durante 18 meses (mientras esté sellada en una bolsa de papel de aluminio) si se almacena a 2-30 °C. Mantener alejado de la luz solar. Una vez que se abre la bolsa de la tarjeta de prueba, la prueba debe realizarse dentro de 1 hora.

INSTRUMENTO APLICADO

MF-T1000 Analizador cuantitativo de inmunofluorescencia de tipo seco de Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.

REQUISITOS DE LAS MUESTRAS

1. El suero y el plasma se obtienen a partir de la sangre total recogida por el método convencional. Las muestras con hemólisis e ictericia severa no deben utilizarse durante todo el proceso. Todos las muestras deben ser tratadas como factores de infección.
2. Las muestras de plasma pueden ser tratadas con heparina sódica y EDTA.
3. Las muestras de suero o plasma no se pueden colocar por más de 1 día a temperatura ambiente (20-25 °C). Si no hay contaminación bacteriana, la muestra puede almacenarse durante 3 días a 2-8 °C, o no más de 1 mes por debajo de -20°C. El almacenamiento congelado repetidamente no puede ser más de 3 veces. Después de ser descongeladas, las muestras deben mezclarse por completo.
4. Las partículas presentes en las muestras afectarán los resultados de la detección. Por lo tanto, las muestras que contienen partículas visibles deben centrifugarse y se debe tomar el fluido sobrenadante.
5. Antes de ser analizada, la muestra debe recuperarse a temperatura ambiente. Las muestras congeladas y conservadas que se van a procesar deben descongelarse por completo, retornar a temperatura ambiente y mezclarse bien.

CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA

1. Encienda el instrumento de acuerdo con las instrucciones.
2. Compruebe la consistencia del chip de identificación y el número de lote o los kits de diagnóstico. No toque el extremo de inserción del chip de identificación cuando esté insertado.
3. Abra la bolsa de aluminio rasgando el empalme y coloque el cassette de prueba en la mesa de operaciones plana. El cassette de prueba debe usarse dentro de 1 hora.
4. Sosteniendo la pipeta verticalmente, agregue 70 ul de la muestra bien mezclada o del producto de referencia sin burbujas de aire al pocillo de la muestra en el cassette de prueba.
5. Se coloca a temperatura ambiente durante 15 minutos, y luego insértelo en el soporte de de prueba del analizador e inicie la prueba de acuerdo con el manual de instrucciones del analizador. Unos segundos después, el resultado se mostrará automáticamente en la pantalla. El resultado también se puede guardar e imprimir.
6. El cassette de prueba utilizado debe tratarse de acuerdo con el peligro biológico potencial.
   NOTA: La prueba debe realizarse a 20-25 ° C, humedad 35% -85%.

RANGO DE REFERENCIA

El rango de valores de referencia del kit de diagnóstico para el NT-proBNP: <75 años de edad es de 0-300 pg/mL y ≥75 años de edad es de 0-450 pg/mL. Cada laboratorio debe establecer su propio rango de referencia de acuerdo con las características de la población local. Los resultados de las pruebas deben basarse en el rango de referencia y otros factores clínicos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

1. El reactivo se utiliza únicamente para el diagnóstico auxiliar. La conclusión final debe obtenerse del médico integral combinándolo con otros resultados de diagnóstico clínico y los datos de las pruebas.
2. Posibles causas de los falsos resultados positivos: la alta concentración de anticuerpos o antígenos similares para producir reacciones cruzadas en la muestra; Algunas de las moléculas pequeñas que son similares al NT-proBNP se unen a los anticuerpos marcados con fluorescencia, lo que se denomina unión inespecífica.
3. Posibles causas de los falsos resultados negativos: baja concentración del determinante en la muestra; una concentración extremadamente alta del determinante en la muestra puede causar el efecto HOOK, que mostrará el resultado negativo en condiciones extremas; Algunos componentes desconocidos protegen al determinante antigénico de la unión al anticuerpo.
4. Otras causas de errores: incluyendo tecnología, errores de operación y otros factores de la muestra.
5. La precisión de la adición de muestras afectará directamente la precisión de los resultados de la prueba.
6. Compruebe la integridad y validez del kit antes de usarlo, luego abra el paquete y vuelva a temperatura ambiente (20-25 °C). La baja temperatura afectará directamente los resultados.

ÍNDICE DE CARACTERÍSTICAS

Utilice los productos de referencia internos de NT-proBNP de la empresa / productos de control de calidad para la prueba de evaluación, múltiples indicadores del rendimiento del kit cumplen con los estándares. Los indicadores específicos de rendimiento son los siguientes:

1. Precisión: La desviación relativa de los resultados de la prueba está dentro de ±15%
2. Sensibilidad analítica ≤100pg/mL
3. Repetibilidad (Within-run Precision): CV≤15%.
4. Reproducibilidad (Between-run Precision): CV≤15%.
5. Lineal de la curva dosis-respuesta

En el rango de 100-35000pg/mL, el valor del coeficiente de correlación lineal R de la curva dosis-respuesta es > 0,975.

OBC Team
Distribuidor Oficial de Fluorecare
+ 511 739 7503
info@obcteam.com.pe

ATENCIÓN

1. El kit solo se utiliza para el diagnóstico in vitro; No se puede utilizar repetidamente.
2. Los kits deben tratarse como materiales infecciosos.
3. Todas las muestras, reactivos y contaminantes potenciales deben desinfectarse y tratarse de acuerdo con las regulaciones locales.
4. Lea las instrucciones del reactivo y del instrumento antes de la operación.
5. No se pueden mezclar diferentes lotes de componentes de reactivos. Cada lote de reactivos tiene los parámetros correspondientes que deben ser actualizados. De lo contrario, el nuevo lote de productos no será identificado por el instrumento.

INTERPRETACIÓN DE ICONOS

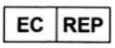
	No reutilizar		Límite de temperatura
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro		Consulte las instrucciones de uso
	Contiene suficiente para <n> pruebas		Mantener seco
	Mantener alejado de la luz solar		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fabricante		Precaución
	Riesgos biológicos		Marcado CE
	Número de catálogo		Código de lote
	Fecha de fabricación		Fecha de caducidad

REFERENCIA

1. Guo Shijie, Wang Lin. Comprensión actual y aplicación clínica del péptido natriurético cerebral Pro N-terminal. [J] Revista de la Universidad Médica de Tianjin, 2013,1.
2. Wang Mei y Wang Jinliang. Avances en la aplicación clínica de la detección de péptidos natriuréticos cerebrales Pro N-terminales. [J] Revista Internacional de Medicina de Laboratorio, 2011, 1.

INFORMACIÓN GENERAL


Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.
Rm. 405, 406, Zona B / 4F, Rm. 205, 206-1, 207, Lado Oeste de Zona B/2F, Edificio Haowei, No. 8 Langshan 2nd Road,
Songpingshan, Comunidad de Songpingshan, Calle Seely, Distrito de Nanshan, Shenzhen, República Popular China
Código Postal: 518055
Número de Teléfono: +86-755-61688835
Fax: +86-755-61688111
Sitio web: www.microprofit-bio.com


MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Münster · Alemania

Fecha de revisión: octubre de 2022